




הוראות שימוש למדיג'ט דיגיטלי

דגם: TH2A3

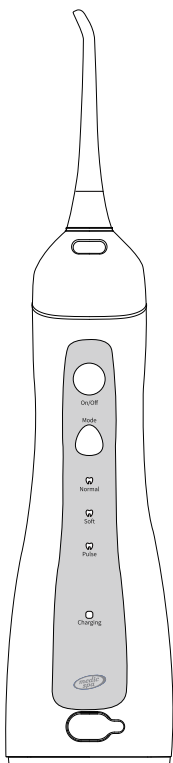

יבואן: מ.פיינגרש ושות' בע"מ
רח' דותן 2, יבנה, טל. 08-9999399



המרכז למוצרים רפואיים ואורטופדיים



תודה שבחרת לרכוש את מכשיר מדיג'יט הדיגיטלי של מדיק ספא

המכשיר נועד לספק סילון מים בלחץ כדי להסיר חלקיקי מזון
בין השיניים ולשמור על מצב חניכיים טוב.
אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר.

אזהרות

1. אין לחבר/לנתק את אספקת החשמל למכשיר בידיים רטובות.
2. אין להשתמש במכשיר אם המכשיר או כבל החשמל פגומים או שהמוצר אינו פועל.
3. אין להשתמש במכשיר זה לשום מטרה מלבד ניקוי הפה.
4. אין לרסס מים לחלק התחתון של הלשון, האוזניים, האף, העיניים או חלקים רגישים אחרים, לחץ המים שנוצר על ידי מכשיר זה עלול לגרום נזק לאזורים הנ"ל.
5. אין להתז מים על אנשים אחרים, במיוחד לא על עיניהם, על מנת לא לגרום לתאונות.
6. במקרה וחווים אי נוחות בניקוי השיניים, יש להיוועץ ברופא השיניים שמטפל בך.
7. אם הרופא שלך ממליץ לך להימנע משימוש באנטיביוטיקה לפני טיפול שיניים, יש להיוועץ עם הרופא שלך לפני השימוש במדיג'יט או בכל כלי עזר אחר להיגיינת הפה.
8. אין להשתמש במכשיר זה אם יש לך פצעים פתוחים בפה או בלשון.
9. לפני השימוש במכשיר זה יש להסיר את כל השיבוצים הנעים מהפה.
10. ילדים מגיל 3 ומעלה ואנשים עם צרכים מיוחדים צריכים להיות בפיקוח צמוד בעת השימוש במוצר זה.
11. אין להוסיף יוד, אקונומיקה או שמן אתרי בלתי מסיס במים למיכל המים של מוצר זה, חומרים אלו יפחיתו את ביצועי המוצר ויקצרו את חיי המוצר. שימוש בחומרים כאלה עלול לבטל את תוקף האחריות.
12. רק טכנאים שהוסמכו ע"י חברתנו רשאים לפרק מוצר זה.
13. אין להפעיל מכשיר זה כאשר אין מים במיכל המים, על מנת לא לגרום נזק למוצר.
14. יש לאחסן את המכשיר בסביבה יבשה ונקייה ולהגן עליו מפני אור שמש ישיר ומקורות חום.
15. יש להשליך את האריזה של מכשיר זה לפח האשפה, יש לשמור מוצר זה מחוץ להישג ידם של ילדים, על מנת למנוע מתינוקות/ילדים לבלוע בטעות אביזרים או לפרק רכיבים.

מסמך מס' 1.0 תאריך פרסום: 03-2021

© כל הזכויות שמורות ל Hunan Accurate Bio-Medical Technology Co., Ltd



הערה: ייתכן שיש מעט נוזל במיכל המים או בצינור היניקה, שהם שאריות המים המזוקקים מבידיקת המפעל, נוזל כזה לא יגרום לסכנות בריאותיות או בטיחותיות.

האריזה מכילה את הפריטים הבאים

- מכשיר מדיג'יט דיגיטלי
- שני ראשי סילון לניקוי השיניים
- ראש לניקוי הלשון
- כבל טעינה
- חוברת הוראות

מדדי ביצועי המכשיר

- לחץ מים מדורג: 30~90PSI
- קיבולת מיכל מים: 180 מ"ל
- פרמטרים של אספקת חשמל:
- מתח ספציפי: 5V==500mA
- סוללה פנימית: 3.7V≥1400mAh
- מצב עבודה: מצב רגיל/עדין/פולסים
- הערה: יש להשתמש במתאם חשמל רפואי העומד בדרישות של IEC 60601-1 לטעינה.

סביבת עבודה

- טמפרטורת הסביבה: 5°C~40°C, RH: ≤90%
- לחץ ברומטרי: 70kpa~106kpa

תנאי הובלה ואחסון

- טמפרטורת הסביבה: -20°C~55°C, RH: ≤90%
- לחץ ברומטרי: 70kpa~106kpa

תכונות המכשיר ויישום

1. בחירת מצב ממספר אפשרויות
2. עיצוב ארגונומי, קל ונוח לתפעול
3. ראשי סילון מים ניתנים להחלפה, ניתן לשימוש על ידי מספר בני משפחה.

יישום

- מיועד לשיטיפה דרך הפה.
- מידות המכשיר: כ-196×62×95 מ"מ (לא כולל ראש הסילון).
- משקל המכשיר: כ-264 גרם (לא כולל ראש הסילון).

הוראות לניקוי ראשוני

- יש לנקות את המכשיר לפני השימוש הראשוני.
- הערה:** מכשיר זה עמיד למים (IPX7) ולכן ניתן לשטוף אותו ישירות מתחת לברז, נא לייבש את המכשיר לאחר השטיפה.

אזהרות: אין להשרות את המוצר במים.

אין לשטוף את המוצר במים חמים מעל 30 מעלות צלזיוס, על מנת לא לגרום לרכיבים לדהות או לעיוות או לשריפת/המסת רכיבים.

לאחר ניקוי המוצר עם חומר ניקוי, יש לנגב אותו במטלית יבשה לפני שטיפה במים נקיים, על מנת לא לפגוע ברכיבים הפנימיים.

אין להשתמש במדלל, בנזין או אלכוהול לניקוי המוצר, על מנת לא לגרום לרכיבים להיסדק, לדהות או להישבר.

הוראות שימוש

טעינה

יש לטעון את המכשיר במלואו לפני השימוש. כדי לטעון את המכשיר יש לחבר את כבל הטעינה למחשב או לשנאי מתאים ואז לחבר לשקע החשמל. בתהליך הטעינה, נורית הטעינה תהבהב. זמן הטעינה הוא כ-4 שעות. נורית הטעינה תישאר דולקת כאשר המוצר ייטען במלואו ואז ניתן לנתק את כבל הטעינה.

הערה: לפני טעינת המכשיר יש להסיר את כיסוי הגומי ולשמור אותו כראוי.

הערה: כאשר המכשיר פועל ומתח הסוללה יורד, נורית הטעינה תהבהב ברציפות, מה שמציין שיש לטעון שוב את המכשיר.

הערה: לעולם אין להשתמש במוצר בתהליך הטעינה.




יש להרכיב את פיית ראש הסילון שבחרתם ע"י חציצה והחזקה של כפתור לשחרור ראש סילון, לאחר שפיית ראש הסילון נכנסה למקומה שומעים צליל "קליק" ואז יש לשחרר את הכפתור. כדי להסיר את פיית ראש הסילון יש ללחוץ על כפתור לשחרור פיית ראש הסילון ולהסיר את ראש הסילון.

אזהרה: לעולם אין ללחוץ על כפתור לשחרור ראש סילון כאשר המכשיר פועל.

המשך הוראות שימוש

יש להוסיף מים למיכל המים ע"י פתיחת מכסה מיכל המים והנחתו מתחת לברז, לאחר הוספת מספיק מים יש לסגור את מכסה מיכל המים.

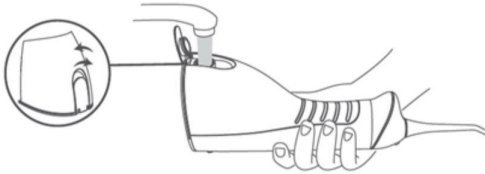

אזהרה: אין להוסיף למיכל המים, מים שחומם מעל 30 מעלות צלזיוס, כדי לא לקבל כוויית

יש ללחוץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר ולבחור מצב העבודה כדי לאפשר את מצב העבודה.

יש לבחור את מצב העבודה, מצב רגיל, מצב עדין ומצב פולס. מומלץ להתחיל במצב עדין ולהמשיך בהדרגה למצבים הנוספים בהתאם ליכולת ההסתגלות שלך.

למוצר זה יש פונקציית זיכרון מצב אחרון. כאשר אתה מפעיל את המוצר, הוא יקפוץ אוטומטית למצב שנבחר פעם קודמת.

תהליך ושיטת שטיפת הפה

יש להישען על הכיור, להכניס את ראש הסילון לפה, מומלץ לכוון את קצה ראש הסילון אל קו החניכיים ולאחר מכן לחץ על כפתור ההפעלה. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, מומלץ להתחיל בשטיפה מהשיניים האחוריות ולהתקדם לשיניים הקדמיות, יש להזיז את הקצה הפיה לאורך קו החניכיים ולהשאירו בין השיניים לזמן מה (כדי שהמים יתיזו בין השיניים מהחלק העליון ועד לקצה שבין השן לחניכיים), כך גם השיניים העליונות וגם השיניים התחתונות יהיו נקיות.

הערה: בעת שימוש במכשיר זה, יש להגדיר את זרימת סילון המים בזווית של 90 מעלות לקו החניכיים, על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר. רצוי לסגור קלות את השפתיים בהליך השטיפה כדי למנוע התזת מים, אך עדין להשאיר מרווח כדי לאפשר למים העודפים בפה לזרום בחופשיות לכיור.

הערה: כאשר אתה משתמש במכשיר זה לניקוי הפה בפעם הראשונה, גם אם החניכיים שלך בריאות, אתה עלול לחוות דימום קל מהחניכיים.

הסיבה לכך היא שהחניכיים שלך מגורים על ידי לחץ הסילון בפעם הראשונה. החניכיים בדרך כלל יפסיקו לדמם לאחר שבוע או שבועיים של הסתגלות. אם דימום החניכיים שלך נמשך יותר משבועיים, ייתכן שיש בעיה בחניכיים (כגון דלקת חניכיים). במקרה כזה, עליך להפסיק להשתמש במוצר זה ולהתייעץ עם רופא שיניים.

הערה: אין לרסס מים ישירות לכיס החניכיים.

אזהרה: אין להניח את קצה פיית סילון המים כנגד השיניים או החניכיים

אזהרה: אין לחלוק פיה של סילון מים עם אנשים נוספים.

זהירות: אנשים עם פה רגיש צריכים להפעיל את המוצר הזה בזהירות נוספת.



ניקוי לאחר השימוש

- יש לנקות את המכשיר היטב לאחר השימוש, מכיוון שכל שאריות מים הנמצאות במיכל עלולות להצמיח חיידקים.
- יש לפתוח את מכסה המים ולשפוך את המים.
- יש להפעיל את המכשיר עד שלא יצאו יותר מים.
- יש לכבות את המכשיר.

אזהרה: לאחר השימוש, יש לשפוך את המים מהמיכל ולהפעילו כדי לנקז את המים. אם נעשה שימוש במכשיר במצב לא תברואתי, בריאותך עלולה להיפגע עקב התרבות של עובש וחיידקים. בנוסף, עלולים להיות ריחות לוואי ותקלות.

- **פיית סילון המים** - יש לנקות את הזרבובית במים, ולאחר מכן לייבש אותה עם מטלית. מומלץ להחליף את הפיות כל 3 חודשים. במידה וקצה פיית ראש הסילון מעוות, יש להחליף את הפיה בהקדם. אחרת, זה עלול להשפיע על השימוש ואפילו לגרום לתקלה למכשיר.
- **מיכל מים** - יש לייבש את מיכל המים לפני החסנתו למשך זמן רב.
- **מכסה מיכל מים** - יש לנגב את כתמי מים, אחרת לכלוך וחיידקים יופיעו בקלות. לכלוך במיכל המים עלול לגרום לנזילת מים.
- **סוללה** - הסוללה תמיד צריכה להיות מלאה.

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון
המכשיר לא עובד	המכשיר נרכש לאחרונה או נשמר ללא שימוש במשך יותר מ-3 חודשים.	יש להטעין את המוצר במלואו ולאחר מכן להפעילו. אם המוצר עדיין לא עובד, כנראה שהוא ניזוק. יש ליצור קשר עם היצרן או המשווק.
המוצר פועל רק לכמה דקות לאחר כל טעינה	המוצר אינו טעון במלואו ומתח הסוללה נשאר נמוך או שהסוללה הגיעה לסוף מחזור החיים שלה.	יש להטעין באופן רציף ומלא את המכשיר ולאחר מכן להפעילו. אם תקלה זו עדיין קיימת, יש לפנות ליצרן או למשווק.
לחץ המים נמוך	1. קצה הפיה חסום על ידי לכלוך. 2. קצה הפיה נפגם.	יש להחליף את פיית ראש סילון.
לא יוצאים מים מהמכשיר	1. אין מים במיכל המים. 2. השימוש במכשיר מתבצע בשיפוע גדול מדי. 3. קיים לכלוך במשאבה.	1. יש להוסיף מים למיכל המים. 2. יש להשתמש במכשיר במצב אנכי. 3. יש ליצור קשר עם היצרן או המשווק.

יש להוציא את הסוללה לפני השלכת המכשיר.
יש לבצע את השלבים הבאים כדי להוציא את הסוללה

1. יש לכבות את המכשיר.
2. יש להוציא את מיכל המים, לפרק את הברגים בחלק התחתון ובחלק העליון של המכשיר כדי לפרק אותו.
3. יש לחתוך את הכבל החיובי והשלילי של הסוללה.
4. יש להוציא את הסוללה.

אם לא הצלחתם להוציא את הסוללה, אנא שלחו את המכשיר ליבואן או למרכז השירות, אשר יסייעו להשמיד את הסוללה בהתאם לתקנות הלאומיות החלות.

בהתחשב בכך שמוצר זה מכיל רכיבים אלקטרוניים, נא לא להשליך את המוצר הזה יחד עם פסולת ביתית כללית אלא להשליך אותו בהתאם לתקנות המקומיות.



אחריות

- האחריות המפורטת להלן היא לשנה אחת מיום קניית המוצר.
- האחריות בתוקף רק בצירוף חשבונית מס עם תאריך קניה.
- האחריות מוגבלת לתיקון או להחלפה ללא תשלום של כל חלק במוצר אשר יראה לנו פגום ואשר על פי שיקול דעתנו נגרם כתוצאה מפגם בייצור.
- האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 1. קלקול שנגרם כתוצאה משימוש שלא לפי הוראות השימוש.
 2. שבר או תקלה שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחת המוצר או נזקים עקב גורמים חיצוניים.
 3. טיפול, שינוי או תיקון כלשהו אשר נעשו ע"י מי שלא הוסמך על ידנו.

אין האחריות כוללת חלקים מתכלים

יבואן: מ.פיינגרש ושות' בע"מ
רח' דותן 2, יבנה, טל. 08-9999399



המרכז למוצרים רפואיים ואורטופדיים